



TRILASER

DIE KRAFT VON DREI WELLENLÄNGEN
FÜR EINE UNERREICHTE HAARENTFERNUNG



DIE NEUE GRENZE DER LASEREPILATION

Unerwünschte Haare sind bekanntlich sowohl für Frauen als auch für Männer ein lästiger Makel, der sie regelmäßig dazu zwingt, zu einer Lösung zu greifen (Enthaarung, Wachsen usw.), die jedoch niemals "endgültig" ist.

DIE LASEREPILATION IST EINE DER
WIRKSAMSTEN TECHNIKEN
ZUR HAARENTFERNUNG
MIT DAUERHAFTER WIRKUNG.

Die Baldan-Gruppe hat ihr Angebot an Epilationstechnologien für die professionelle Ästhetik um **Trilaser** erweitert, ein innovatives Gerät, das **Wirksamkeit, Schnelligkeit und Komfort** vereint und eine Haarentfernung mit **deutlicherer und dauerhafterer Wirkung** als andere Technologien ermöglicht.

TRILASER

DREIFACHE WELLENLÄNGE

DAS **HAUPTMERKMAL VON TRILASER**
IST DIE KOMBINATION VON DREI WELLENLÄNGEN
IN EINEM HANDSTÜCK:

1. 808nm
2. 950nm
3. 1064nm

GEMÄSS DEN
KOSMETIK-VORSCHRIFTEN!

Warum sollte man sich dafür entscheiden:

- Wirksam, schnell, sicher und schmerzlos
- Geeignet für alle Fototypen und sogar für gebräunte Haut
- 3 Laser-Wellenlängen in einem Handstück
- Standard-Handstück mit 2,4 cm² Spot für kleine Flächen
- Optionales Handstück mit 4,5 cm² Spot für große Flächen
- "Chiller" Kühlsystem



TRILASER

SCHNELLE, EFFIZIENTE UND KOSTENGÜNSTIGE LASEREPILATION

DAS **TRILASER** HANDSTÜCK

(standardmäßig mit 2,4 cm² oder optional mit 4,5 cm² Spot) reduziert mit seiner Spotgröße und den drei Wellenlängen die Zeiten erheblich und macht die Behandlungen vollständig und sicher.

Die Spotgröße ermöglicht daher eine schnelle Epilation großer Körperbereiche, wodurch sich die Dauer der Behandlung verkürzt.

Technische Merkmale:

Standard-Handstück: Spotgröße 2,4 cm²

Optionales Handstück: Spotgröße 4,5 cm²

Leistung 1000 Watt



TRILASER


3 WELLENLÄNGEN FÜR EINEN MASSENEFFEKT

Das **Trilaser-Handstück** kombiniert 3 Wellenlängen, die gleichzeitig arbeiten und es ermöglichen, die gesamte Struktur der Haarfollikel in der **gleichen Sitzung** der Tiefe zu erreichen: 950nm tiefer als 808nm und 1064nm tiefer als 950nm.

DIE ANZAHL DER HAARE, DIE BEREITS BEI DER ERSTEN SITZUNG REDUZIERT WERDEN, IST BEEINDRUCKEND!


808nm

Zielt auf das Melanin in der Haarzwiebel, das sie erreicht und wodurch sie die Lichtenergie freisetzt, die die Zwiebel verbrennt.

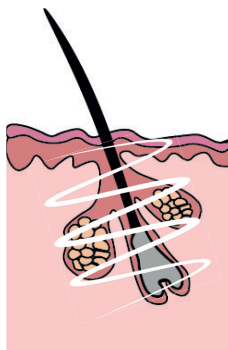


950nm

Zielt auf das Wasser rund um die Zwiebel, erreicht es und verdampft es. Die Zwiebel stirbt durch Austrocknung.

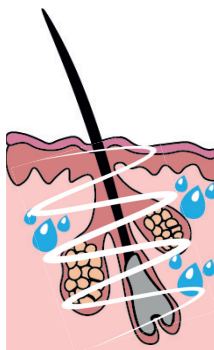

1064 nm

Zielt auf die Blutgefäße rund um die Zwiebel, erreicht sie und trocknet sie aus. Die Zwiebel stirbt ab, weil sie keine Nährstoffe aus dem Blut erhält.

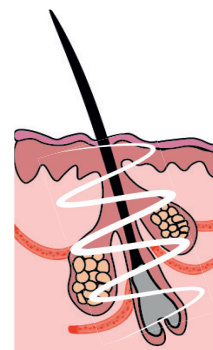

MIT ANDEREN WORTEN

Mit Trilaser wird der Feind Haar nicht nur mit Waffen angegriffen (d.h. nur mit dem 808nm-Laser), sondern auch durch Abschneiden der Nahrungs- und Wasserversorgung!

TRILASER



"CHILLER" KÜHL SYSTEM

DEN GANZEN TAG, KEINE SCHMERZEN

Trilaser verwendet das "Chiller"-Kühlsystem, das Sicherheit und Komfort für den Kunden sowie Temperaturkontrolle garantiert.

Das "Chiller"-System ist eine echte Kühleinheit, die eine längere Verwendung der Technologie ermöglicht: Der Bediener kann den ganzen Tag über Behandlungen durchführen (bei Bedarf auch nachts), ohne auch nur einen Moment zu pausieren.

Die Kühlung des Objektträgers in Kontakt mit der Haut ist so stark, dass sie das Schmerzempfinden auslöscht.

TRILASER

DIE VORTEILE



1. MASSENWIRKUNG

Geeignet auch für Haare, die gegen andere Laser resistent sind, mit enormer Ausdünnung bereits ab der ersten Sitzung.

2. BEHANDLUNGSGESCHWINDIGKEIT

Für den Rücken genügen 20/25 Minuten.

3. NEUE KUNDEN

Auch sehr helle Haare können behandelt werden.

4. GANZJAHRESEINNAHMEN

Auch dunkle und gebräunte Haut kann behandelt werden, so dass das ganze Jahr über, auch im Sommer, gearbeitet werden kann.

TRILASER

TRILASER

UNSERE STANDORTE

Belgien
Luxemburg
Frankreich
Holland
Deutschland
Österreich
UK
Irland
Schweiz
Russland
Kuwait
Rumänien
UAE
Mexiko
Kolumbien
Türkei
Zypern



MAC084P02/DE

B A L D A N
G R O U P
www.baldangroup.com